


## 实验目的

- ◆1.以乙酸和苯胺为原料合成乙酰苯 胺
- ◆2.乙酰苯胺粗品用水重结晶法得到 纯品
- ◆3.掌握分馏柱除水的原理及方法

## 反应原理

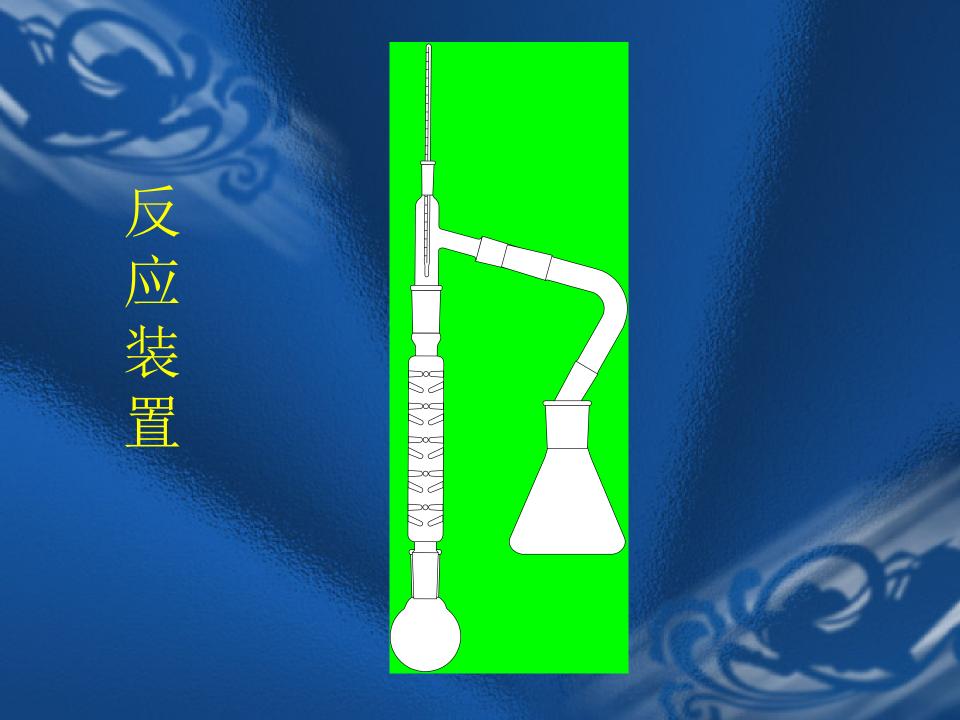

## 实验操作

- ◆ 1.将5ml苯胺,8.5ml冰醋酸,0.2克锌粉加入 100ml的圆底烧瓶中,放在石棉网上小火加热 至反应物沸腾,然后控制火焰保持温度计读数 在105℃左右,约30-40分钟,到终点后,停止加热。
- ◆ 2.将反应液以细流倒入100ml冷水中,并不断搅拌,冷却后抽滤,用5-10ml冷水洗涤。
- ◆ 3.将粗产品放入有100ml热水的烧杯中,进行重结晶操作。
- ◆ 4.将所得固体称重。

## 注意事项

- ◆ 1.用石棉网小火加热,先到微沸,然后控制 火焰,使温度计显示在105℃
- ◆ 2.如果温度过高,会在很短时间内把酸蒸出,如果过低,水就蒸不出来